

COLPOSCOPIO

PRIMA GN



UNE SOLUTION VARIABLE POUR UNE UTILISATION MODERNE



Le prima GN est une solution idéale pour la chirurgie et le travail de diagnostique. Avec une superbe optique et une performance mécanique marquable vous assure de nombreuses années d'utilisation sans soucis.

Le support mobile en forme H est facilement transportable d'une pièce à une autre, permettant ainsi l'utilisation de plusieurs pièces et d'un rangement des plus simple. Alternativement le système peut être monter directement sur un siège d'examination, ou sur un axe court pour un diagnostique de travail rapide ou bien dans une configuration de montage par dessus les épaules.

Le prima GN a été dessiner pour transmettre tous types d'images digital avec la documentation nécessaire. Les médecins peuvent utiliser la video caméra digital ou le SLR grâce à une large sélection d'adapteurs disponible à travers la gamme Labomed Proline. La propriété de la serie caméra Ivu fournis une excellente résolution avec sa haute définition en image et fonction de capture et diffusion en continu.



La diffusion en continu peut-être directement envoyé à l'écran moniteur monter de manière pratique sur le Colposcope Prima GN.



L'intégration du système à illumination à lumière froide 50W LED intégré dans le bras pivotant fait du Prima GN un système bien équilibré. Le changement d'ampoule est une chose du passé car maintenant la forte brillance et lumière blanche du LED vous fournis un taux de 60,000 heures de vie.

La propriété Labomed *Maxlite™* vernis pour optique apochromatique, délivre un niveau de détail, de correction de couleur et de propriété anti réfléchive qui sont des caractéristiques approprier pour les salles d'opérations.

Cela fait que le colposcope Prima GN le premier de la classe en terme de bonne valeurs



PRIMA GN COLPOSCOPIO

Tube binoculaire
Oculaires

Agrandissement apochromatique
Objectifs
Source de lumière
Filtres incorporés
Mouvement verticale du bras
Support microscope
Accessoires optionelle

Base (dimensions)

Hauteur du support

Masse total du microscope

Course d'élévation

Hauteur du support en position horizontale

Tube d'observation droit 90°, Option: tete inclinable à 45°.
WF 10x/18 mm avec des gardes oculaires rétractables,
réglage dioptrique ± 5 mm et verrouillage de la dioptrie
Facultatif version: 12.5X/18mm; avec gardes oculaires fixes.

5 phases 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X and 2.5X
f = 300 mm; mise au point manuelle fine.

50W LED

Vert

550 mm

Droit

Diviseur de faisceau.

Gamme *ProLine* : adaptateurs iVu G5 avec 5 mégapixels,
appareil photo numérique intégré
600 mm profondeur, 620 mm de longueur.


984 mm

80 Kg (approx).

570 mm

775 mm

SPÉCIFICATION

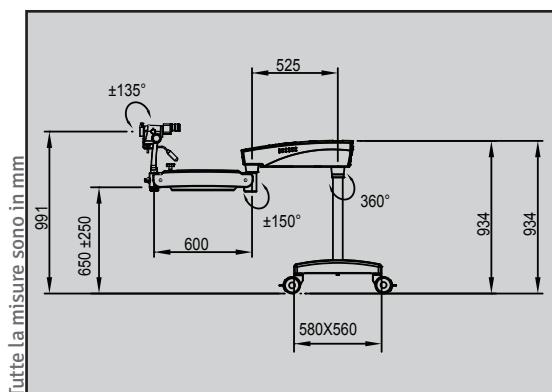

Description GN

PRIMA GN

PRIMA GN

CONFIGURAZIONE

Colposcope avec support H mobile

Colposcope avec support H mobile
version dessus d'épaules

NUM. CATALOGO

6165000-000

6165000-100



Labo America, Inc.
920 Auburn Court
Fremont, CA 94538

Tel: (510) 445-1257

Fax: (510) 445-1317

E-mail: sales@laboamerica.com

www.laboamerica.com



ISO 9001 : 2008

LABOMED

Rivenditore

6165000-796 1.0
© Labo America, Inc. Diritti riservati.