

LABOMED®
ideas for vision



PRIMA
swift


**Microscopio
ORL**

ALTE PRESTAZIONI, PRECISIONE ACCESSIBILE - PORTATO NELLA TUA CLINICA



Il microscopio PRIMA swift è progettato per soddisfare i medici e i chirurghi ENT con una chiarezza ottica impeccabile, una manovrabilità fluida e precisa, tutto in un design elegante e raffinato che si adatta a qualsiasi ambiente.

Un potente sistema di illuminazione LED da 27 W offre oltre 100.000 lux a una temperatura di colore simile alla luce naturale, garantendo un'illuminazione brillante, omogenea e naturale per la visione diagnostica e chirurgica più precisa. Una gamma di accessori della nostra linea ProLine rende il PRIMA swift modulare sin dal primo giorno, consentendo alla tua clinica di aggiungere o integrare funzionalità secondo un programma che meglio si adatta al tuo budget.

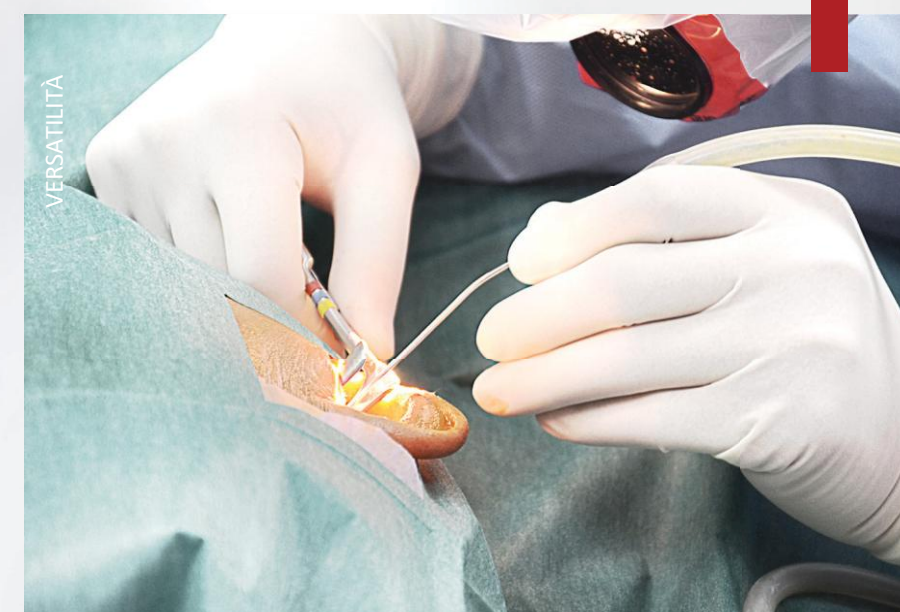

POTENZIANDO I MEDICI CON ECCELLENZA VISIVA

Con i progressi in Otorinolaringoiatria (ENT), sempre più interventi vengono eseguiti in ambienti ambulatoriali e cliniche, rendendo necessario che i microscopi non solo siano guidati dalle prestazioni, ma anche versatili grazie alla modularità. PRIMA swift offre chiarezza ottica e movimenti fluidi per un utilizzo preciso e confortevole da parte di medici e chirurghi ENT. Ottieni precisione e alte prestazioni con l'ottica avanzata e l'illuminazione a LED di PRIMA swift, progettate per comfort ed efficienza durante gli esami di orecchie, naso e gola.



Adattabilità

Scopri una versatilità senza pari con il PRIMA swift. La sua ottica adattabile e il movimento fluido del braccio garantiscono precisione durante le procedure diagnostiche, mentre le attività chirurgiche diventano senza sforzo. Che si tratti di esami approfonditi o interventi chirurgici, l'illuminazione precisa del microscopio e il design ergonomico ti permettono di fornire costantemente il massimo livello di assistenza nel campo specializzato dell'otorinolaringoiatria, stabilendo nuovi standard nel trattamento dei pazienti e nei risultati.



Ottiche superiori

Goditi una chiarezza visiva eccezionale e un sollievo per gli occhi con il microscopio ENT Labomed PRIMA swift. Il design ottico apocromatico si unisce a rivestimenti superiori per offrire ottiche resistenti al riverbero e ai graffi che resisteranno nel tempo. Un cambiamento di ingrandimento regolabile in modo fluido offre una gamma di impostazioni di ingrandimento che possono essere regolate con l'aiuto di accessori ottici facilmente disponibili. Inoltre, con il miglior vetro del mondo, PRIMA swift fornisce più luce dove conta di più: nelle orecchie, nel naso e nella gola.



Illuminazione brillante

L'illuminazione brillante e omogenea è fornita grazie a un sistema di illuminazione a LED da 27 W integrato. È stata prestata particolare attenzione al design di accoppiamento ottico per minimizzare la perdita di luce internamente. Gli ingressi in vetro di alta qualità, insieme a uno standard di progettazione preciso, consentono al PRIMA swift di offrire un'efficienza suprema: 100.000 Lux con un consumo energetico molto basso e una durata del diodo di 50.000 ore. La luce viene fornita coaxialmente per immagini senza ombre. Con un controllo preciso della temperatura del colore, l'anatomia viene illuminata in modo naturale.



ELEVARE LA PRECISIONE, MIGLIORARE LA CURA




PRIMA swift è la tua porta d'ingresso a una nuova era di eccellenza nelle esaminazioni di orecchio, naso e gola. Con ottiche apocromatiche all'avanguardia e illuminazione LED silenziosa, poniamo l'accento su precisione, comfort ed efficienza. Il nostro design meticoloso assicura che la tua attenzione rimanga dove conta di più: nel fornire cure superiori ai tuoi pazienti. Affidati a PRIMA swift per una chiarezza ottica, movimenti fluidi e affidabilità. Eleva la tua pratica e migliora l'esperienza del paziente con un microscopio che comprende davvero le esigenze del campo otorinolaringoiatrico. Scegli PRIMA swift e abbraccia un futuro di precisione e cure senza pari.


SPECIFICHE

Tubi di osservazione	Tubo binocular dritto a 90°
IPD	49-78 mm
Oculari	Standard: WF 10x/18mm con paraocchi regolabili Opzionale: WF 12.5x/18mm con paraocchi regolabili
Regolazione della diottria	± 7
Magnichanger	Apochromatico 5 passaggi: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x e 2.5x rivestito MaxLite
Obiettivo	Standard: f 250 mm regolabile Opzionale: f 300 mm, f 400 mm NuVarTM 7: f 290-360 mm WD: 200-270 mm regolabile NuVarTM 10: f 300-400 mm WD: 220-320 mm regolabile
FOV	10.6-66.2 mm
Messa a fuoco fine	Manuale, tramite la manopola di regolazione dell'obiettivo
Sorgente di luce	27 W LED, 100-240 V
Lux	100 K
Potenza massima	60 W
Filtri integrati	Verde e giallo
Supporti per microscopio	Supporto verticale del microscopio
Accessori opzionali	Divisore del fascio doppio, rotoplato, doppio diaframma, gamma di adattatori per fotocamera ProLine e adattatori per smartphone




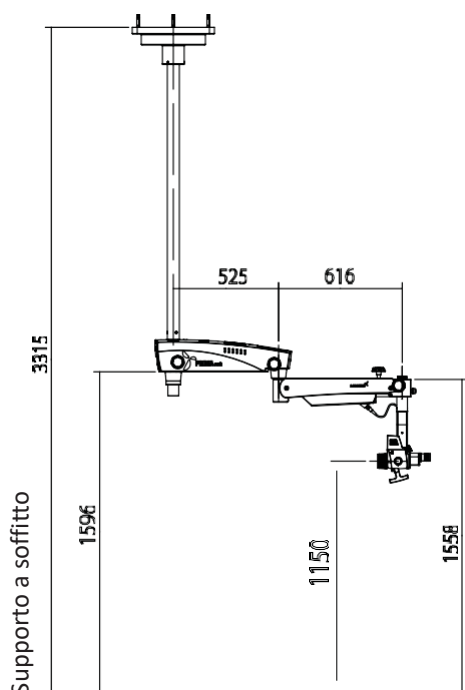

Supporto a soffitto

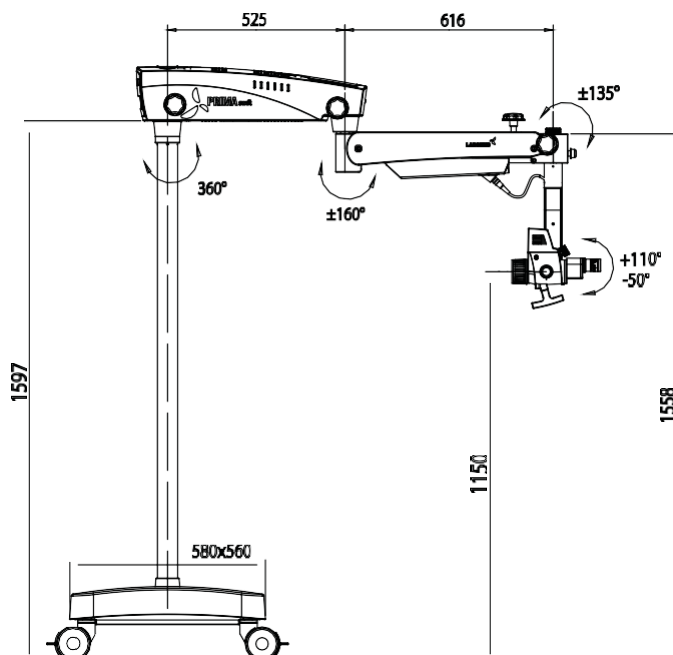

Supporto a pavimento

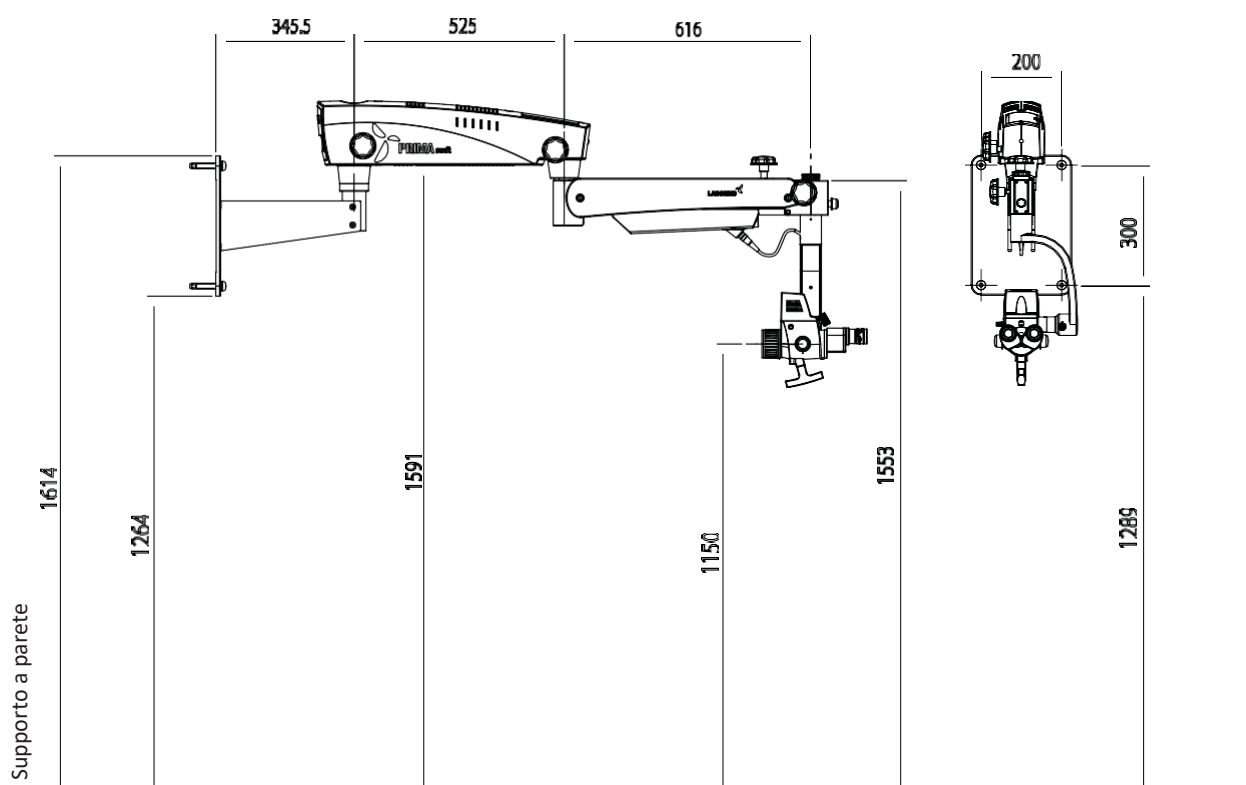

Supporto a parete

DESCRIZIONE
PRIMA swift
PRIMA swift
PRIMA swift

CONFIGURAZIONE
Supporto a pavimento
Supporto a parete
Supporto a soffitto

NUMERO DI CATALOGO
6182501
6182502
6182503



Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
Paesi Bassi
+31 (0)10 45 842 22
sales@labomedeuropa.com
www.labomedeuropa.com

