

LABOMED® 
ideas for vision



PRIMA
swift


**Microscopio
de ORL**

ALTO RENDIMIENTO, PRECISIÓN ASEQUIBLE - LLEVADO A SU CLÍNICA



El microscopio PRIMA swift está diseñado para satisfacer a los médicos y cirujanos de ENT con una claridad óptica impecable, maniobrabilidad fluida y precisa, todo en un diseño elegante y estilizado que realza cualquier entorno.

Un potente sistema de iluminación LED de 27 W proporciona más de 100.000 lux con una temperatura de color verdadera a la luz del día, ofreciendo una iluminación brillante, homogénea y natural que permitirá la vista diagnóstica y quirúrgica más precisa. Una variedad de accesorios de nuestra línea ProLine hacen que el PRIMA swift sea modular desde el primer día, permitiendo a su clínica incorporar o escalar funcionalidades según el plan que mejor se adapte a su presupuesto.

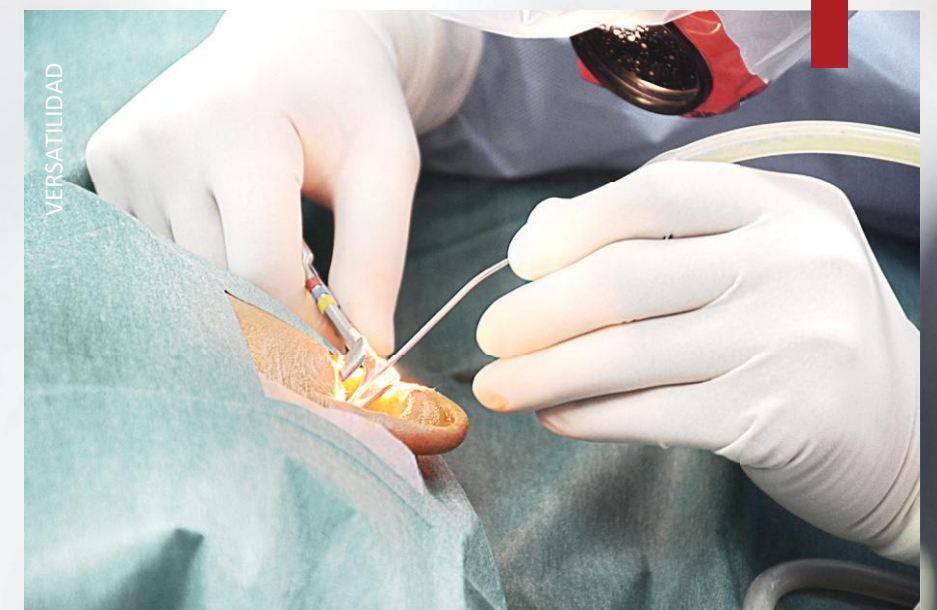

EMPODERANDO A LOS MÉDICOS CON EXCELENCIA EN VISIÓN

Con los avances en la otorrinolaringología (ENT), más procedimientos se realizan en consultorios y centros ambulatorios, lo que hace necesario que los microscopios no solo sean impulsados por el rendimiento, sino también versátiles mediante modularidad. PRIMA swift proporciona claridad óptica y movimientos fluidos para un uso preciso y cómodo por parte de médicos y cirujanos ENT. Logre precisión y alto rendimiento con la avanzada óptica e iluminación LED de PRIMA swift, diseñada para comodidad y eficiencia en los exámenes de oído, nariz y garganta.



Adaptabilidad

Descubre una versatilidad incomparable con el PRIMA swift. Su óptica adaptable y el movimiento fluido del brazo garantizan precisión durante los procedimientos de diagnóstico, mientras que las tareas quirúrgicas se vuelven sin esfuerzo. Ya sea realizando exámenes exhaustivos o cirugías, la iluminación precisa del microscopio y su diseño ergonómico te permiten ofrecer constantemente el más alto nivel de atención en el campo especializado de la otorrinolaringología, estableciendo nuevos estándares en el tratamiento y los resultados de los pacientes.



Óptica excepcional

Disfruta de una claridad visual excepcional y alivio ocular con el microscopio ENT Labomed PRIMA swift. El diseño óptico apocromático se combina con recubrimientos superiores para ofrecer una óptica resistente al deslumbramiento y a los arañazos que resistirá la prueba del tiempo. Un cambiador de aumento ajustable de forma fluida ofrecerá una variedad de configuraciones de aumento que se pueden ajustar con la ayuda de accesorios ópticos fácilmente disponibles. Además, con el mejor cristal del mundo, el PRIMA swift proporciona más luz allí donde más se necesita: en tu oído, nariz y garganta.




Iluminación brillante

Una iluminación brillante y homogénea se entrega gracias a un sistema integrado de iluminación LED de 27 W. Se prestó especial atención al diseño de acoplamiento óptico para minimizar la pérdida de luz internamente. Las entradas de vidrio de alta calidad, junto con un estándar de diseño exigente, permiten que el PRIMA swift ofrezca una eficiencia suprema: 100,000 Lux con un bajo consumo de energía y una vida útil de 50,000 horas para el diodo. La luz se entrega coaxialmente para una imagen sin sombras. Con un control preciso de la temperatura de color, la anatomía se ilumina de manera fiel a la naturaleza.



ELEVANDO LA PRECISIÓN, MEJORANDO LA ATENCIÓN

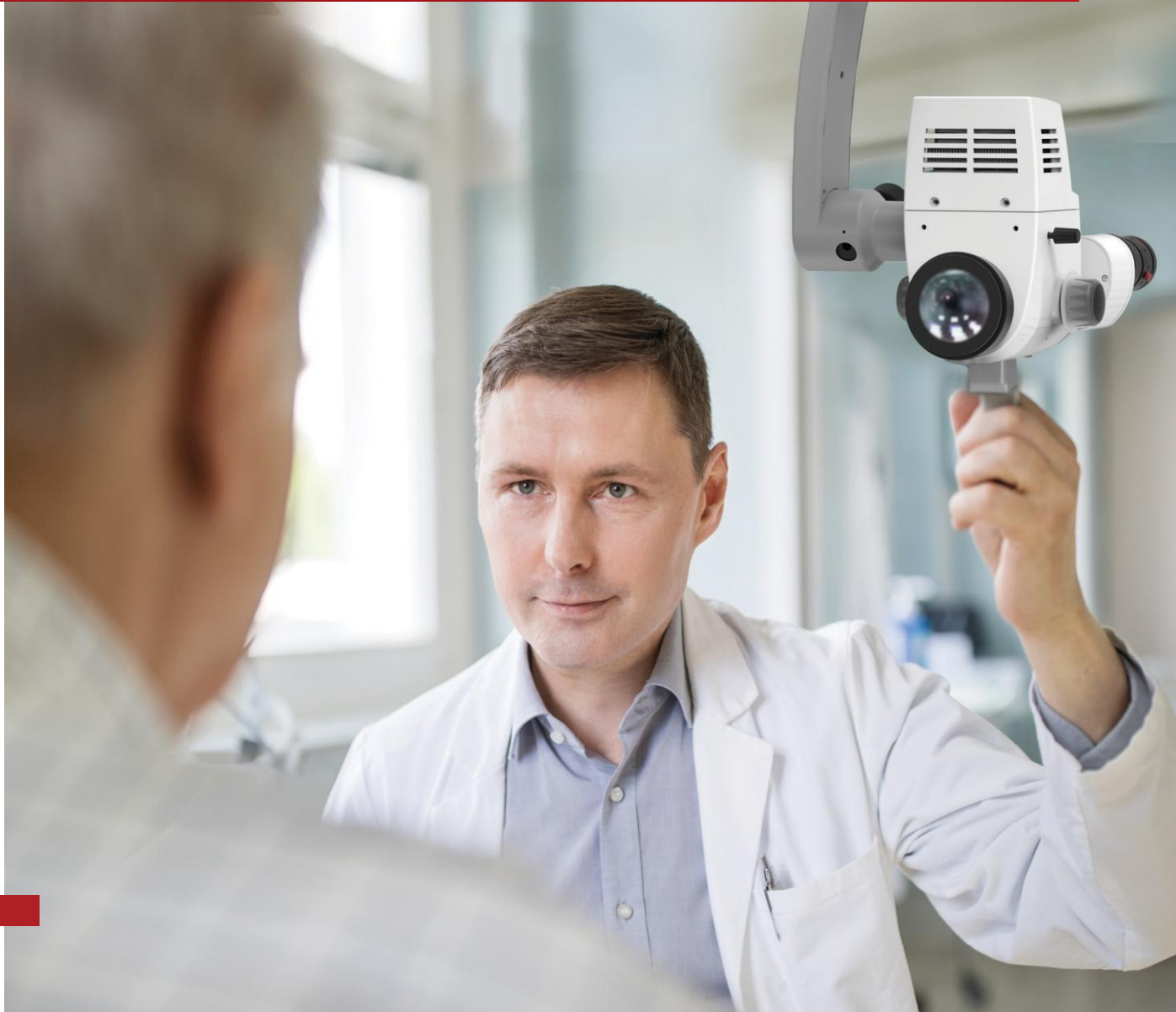


PRIMA swift es tu puerta de entrada a una nueva era de excelencia en los exámenes de oído, nariz y garganta. Con ópticas apocromáticas de última generación e iluminación LED casi silenciosa, damos prioridad a la precisión, el confort y la eficiencia. Nuestro diseño meticuloso asegura que tu enfoque se mantenga donde más importa: en brindar una atención superior a tus pacientes. Confía en PRIMA swift para ofrecer claridad óptica, movimientos fluidos y fiabilidad. Eleva tu práctica y mejora la experiencia de atención al paciente con un microscopio que realmente comprende las demandas del campo de la otorrinolaringología. Elige PRIMA swift y abraza un futuro de precisión y atención sin igual.


ESPECIFICACIONES

Tuberías de observación	Tubo binocular recto a 90°
IPD	49-78 mm
Oculares	Estándar: WF 10x/18mm con protectores de ocular bloqueables Opcional: WF 12.5x/18mm con protectores de ocular bloqueables
Ajuste de dioptrías	± 7
Magnichanger	Apocrómico 5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x y 2.5x recubierto MaxLite
Objetivo	Estándar: f 250 mm enfocable Opcional: f 300 mm, f 400 mm NuVarTM 7: f 290-360 mm WD: 200-270 mm enfocable NuVarTM 10: f 300-400 mm WD: 220-320 mm enfocable
FOV	10.6-66.2 mm
Enfoque fino	Manual, a través de la perilla de ajuste del objetivo
Fuente de luz	27 W LED, 100-240 V
Lux	100 K
Potencia máxima	60 W
Filtros integrados	Verde y amarillo
Porta-microscopios	Porta-microscopios vertical
Accesorios opcionales	Divisor de haz doble, rotoplato, iris doble, gama de adaptadores de cámara ProLine y adaptadores de smartphones




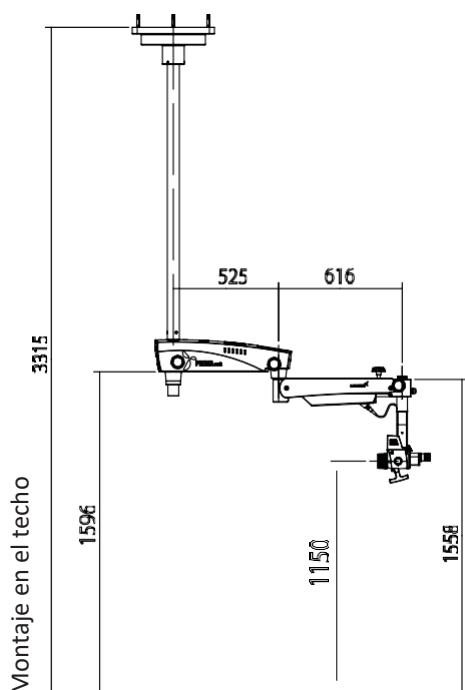

Montaje en el techo

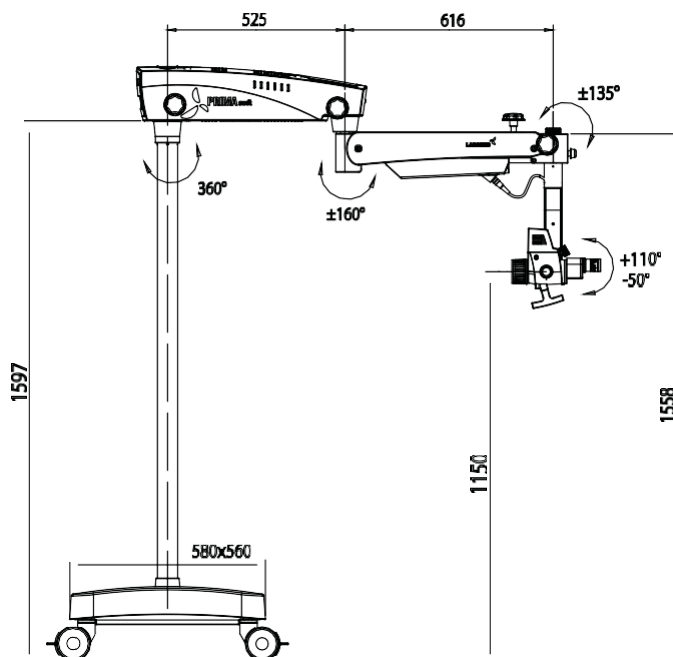

Montaje en el suelo

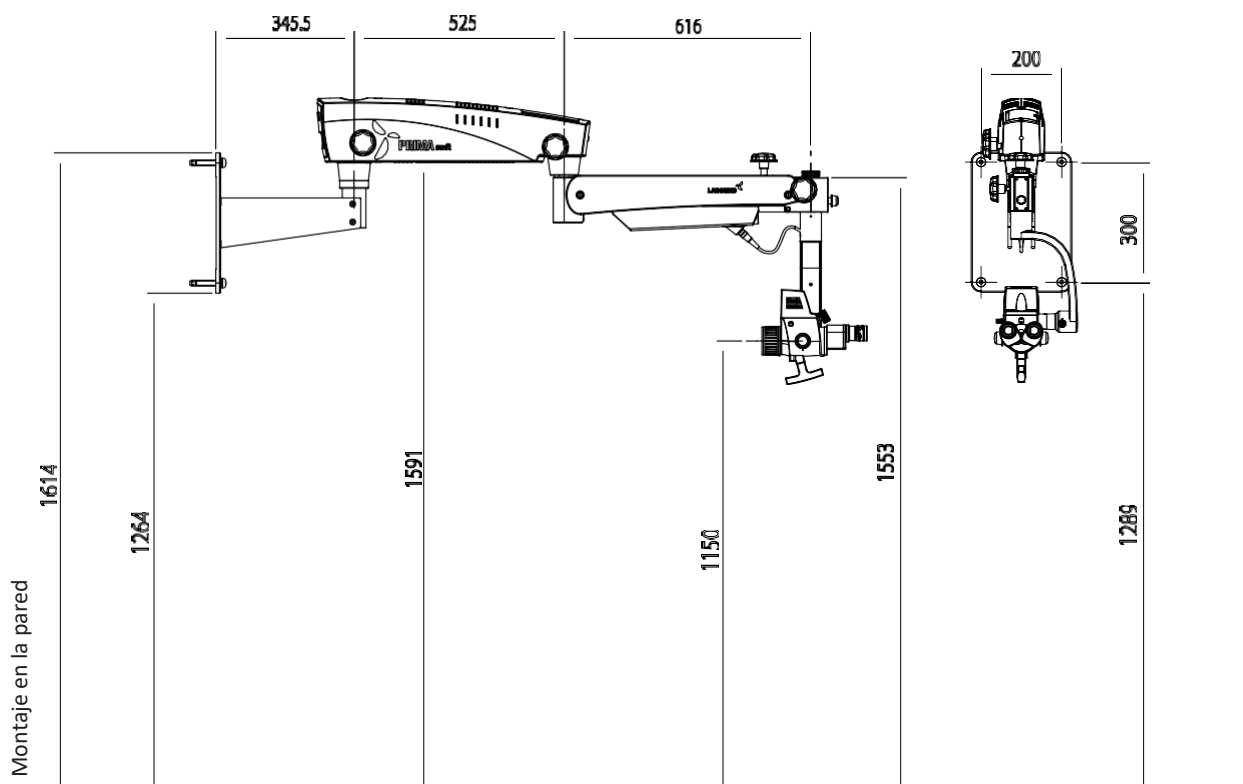

Montaje en la pared

DESCRIPCIÓN
PRIMA swift
PRIMA swift
PRIMA swift

CONFIGURACIÓN
Montaje en el suelo
Montaje en la pared
Montaje en el techo

NÚMERO DE CATÁLOGO
6182501
6182502
6182503



Labomed Europe b.v.
Essebaan 50
2908 LK Capelle aan den IJssel
Países Bajos
+31 (0)10 45 842 22
sales@labomedeurop.com

www.labomedeurop.com

